



Массажное кресло VictoryFit VF-M60

Руководство по эксплуатации

Производитель: Fuan Leerson Electronic Co., Ltd. Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qixiyang Industry Zone, Fuan City, Fujian City, Fujian Province Страна производства: Китай Импортёр: ООО «Сан Планет СПб» Адрес Импортёра: 191167, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В, пом/ком 3-Н/4. ДЕКЛАРАЦИЯ ТС № RU Д-СН.ПХ01.В.07379/20 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ОТ 06.03.2020 ПО 05.03.2025 Гарантийный срок: 12мес Срок службы: 18мес

Каталог

Каталог
1. Каталог
2. Меры предосторожности
3. Подготовка к использованию
4. Установка массажного кресла
5. Регулировка положения спинки
6. Как перемещать массажное кресло
7. Размещение массажного кресла
8. Мощность и питание
9. Функции основных элементов
10. Функции панели управления
11. Руководство по эксплуатации программ массажа
12. Технические параметры
13. Ежедневное обслуживание

Внимание: Компания оставляет за собой право вносить улучшения в продукт и его описание без предварительного уведомления. Изменения в дизайне и описание стандартной конфигурации имеют преимущественную силу, если иное не обозначено.

Технические параметры

Название продукта: Массажное кресло
Модель изделия: VF-M60
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 70 Вт
Номинальное рабочее время: 20 мин
Максимальный вес пользователя: 90 кг
Описание испытания: кресло пригодно для использования

Ежедневное обслуживание

- (1) Массажное кресло следует постоянно содержать в чистоте и не допускать попадания пыли, а также размещать его в месте, где нет сырости.
(2) Если кресло не используется в течение длительного периода времени, пожалуйста, накройте его тканью.
(3) Не оставляйте массажное кресло на солнце или в местах с высокой температурой, так как это приведет к обесцвечиванию и ускоренному старению кожи массажного кресла.
(4) Чтобы почистить массажное кресло, выключите главный выключатель и отсоедините его от сети.
(5) Не используйте для чистки массажного кресла чистящие средства, содержащие органические растворы, например, так как это приведет к обесцвечиванию, порче и растрескиванию кожи.
(6) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальным комплектом от производителя или сервисной службы.

Режим Bluetooth

- (1) Включите Bluetooth и голосовую подсказку по умолчанию.
(2) Откройте функцию Bluetooth в телефоне, найдите аппарат Bluetooth (massage chair), Пароль подключения - (8888) успешное сопряжение, откройте музыку, чтобы начать воспроизведение.
(Bluetooth требует сопряжения с паролем, подсказки по паролю находятся на задней панели пульта управления)

9

Меры предосторожности

1. условия использования

- (1) Выньте вилку питания из розетки после использования или перед чистой уборкой.
(2) Не используйте и не храните прибор в особо влажных помещениях, таких как ванная комната, сауны и горячие источники, так как это может привести к повреждению массажного кресла.
(3) Не используйте в условиях, когда температура в помещении выше 40 градусов Цельсия.
(4) Не используйте массажное кресло на открытом воздухе.
(5) Никогда не используйте массажное кресло в среде со слишком большим количеством пыли, масла или надвигающимся испорченным воздухом.
(6) Не ставьте кресло рядом с горячими поверхностями, камнями или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к перегреву внутренних компонентов массажного кресла и вызвать пожар.
(7) Не ставьте кресло на неровную поверхность. Опорная часть должна располагаться на ровной поверхности, например, на полу.
(8) Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что розетка заземлена. При установке провода заземления для розетки проконсультируйтесь с продавцом.
(9) Не используйте во время кризиса.



2. Медицинские противопоказания

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта (это может вызвать дискомфорт или даже несчастный случай, который может быть опасен)

- (1) Пациенты, страдающие злокачественными опухолями или имеющие злокачественные образования на коже.
(2) Пациенты с тяжелыми заболеваниями сердца.
(3) Пациенты с тяжелыми кожными заболеваниями.
(4) Пациенты с тяжелой остеопорозом.
(5) Пациенты, истощенные беременны.
(6) Пациенты, проходящие медицинское лечение под руководством врача, особенно если они чувствуют себя неважно.
(7) Лица с аномалиями костного позвоночника или искривлением спины вследствие несчастных случаев, болезней и т.д.
(8) Лица с высокой температурой.
(9) Те, у кого деформированы суставы.
(10) Лица в органах, которые имплантированы медицинские устройства, такие как "кардиостимуляторы".
(11) Лица, страдающие острыми внутренними заболеваниями (например, гастрит, анорит, болезни, легкая и т.д.).
(12) Лица с тяжелыми нарушениями кровообращения в ногах.
(13) Поверхность кресла горячая, поэтому люди, не чувствительные к теплу, должны быть осторожны при его использовании.



Пожалуйста, не позволяйте лицам моложе 18 лет или лицам, не способным контролировать свое поведение (например, психически больным, умственно отсталым, парализованным и т.д.), оставаться в одиночестве. Это может привести к поражению электрическим током, травме пользователя или механической поломке.

2

Подготовка перед использованием

1. Установка элементов массажного кресла



Соединение штекеров

2. Регулировка положения спинки

Нажмите кнопки "вперед" и "назад", чтобы отрегулировать угол, наиболее удобный для вашего тела. При нажатии кнопки "подкачивание", спинка (ножки) будет подниматься или опускаться непрерывно. Когда он достигнет нужного положения, просто отпустите кнопку, чтобы остановиться.



Предупреждение: При регулировке спинки и подушек для ног, убедитесь, что за креслом достаточно места

3


Руководство по эксплуатации программ массажа

Описание клавиш ручного управления

- Вкл / Выкл
3 автоматических режима: массаж шеи, массаж спины, массаж всего тела
- Подъем спинки кресла
Нажмите кнопку, чтобы поднять спинку кресла
- Опускание спинки кресла
Нажмите кнопку, чтобы опустить спинку кресла
- Массаж в области шеи, верх спины
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Массаж нижней части спины
Нажмите кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Воздушно-компрессионный массаж ягодиц
Нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж ягодиц
- Скорость, 3 уровня
также регулируется в автоматическом режиме
Воздушно-компрессионный массаж икр
Нажмите эту кнопку, чтобы включить массаж икр
- Интенсивность, 3 уровня
также регулируется в автоматическом режиме
- Нагрев
Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить нагрев
- Bluetooth
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сопряжение по bluetooth
- Нулевая гравитация
Нажмите кнопку, чтобы Включить или выключить нулевую гравитацию

8

Панель управления

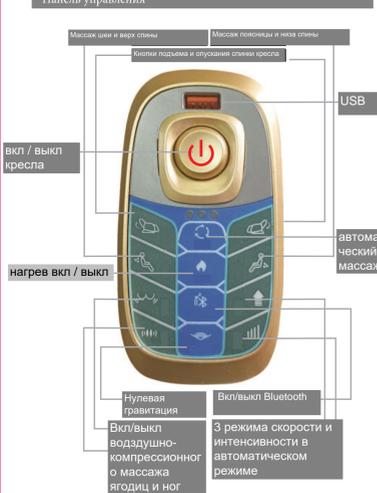

7

3. Перемещение массажного кресла

При перемещении возьмитесь за низ кресла с обеих сторон, приподнимите от пола, а затем двигайтесь.
Внимание! Не перемещайте кресло с людьми.
Не передвигайтесь по полам, которые могут быть легко повреждены

4. Размещение массажного кресла

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть необходимое пространство, когда вы будете готовы начать массаж.

- (1) В помещении, где будет размещено массажное кресло, имеется достаточно места для подъема и опускания спинки.
(2) Пространство сзади массажного кресла и пространство перед креслом не менее 40 см.




4

5. Включение кресла

- (1) Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет никаких препятствий
(2) Вставьте вилку в розетку и включите выключатель питания.



- (2) Вставьте вилку в сетевую розетку и включите выключатель питания.
Вставьте сетевую вилку в сетевую розетку.
Убедитесь, что к вилке питания не прикасаются волосы, пальцы и т.д.
Убедитесь, что шнур питания, шнур ручного управления и вилка питания не повреждены.
Включите выключатель питания.
Переведите выключатель питания в положение I, рядом с задними роликами массажного кресла.

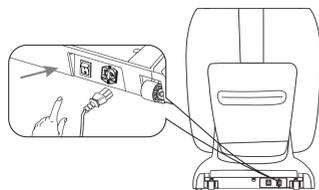

Во избежание поражения электрическим током, источник питания должен быть хорошо заземлен.
- Не использовать беременным женщинам и детям до 13 лет
- Детям не разрешается играть под спинкой кресла.
Предупреждение
- Не прикасайтесь сильными ударами к спинке или нажимайте на вилку блока питания.
Выключайте питание, когда не используете прибор.

6

Названия и функции основных элементов кресла



6